


إجراءات جمع عينات الحمض النووي

يرجى قراءة التعليمات أولاً، ثم اتباعها بعناية


الخطوة 1: ضع ملصقاً على ظرف المسحة

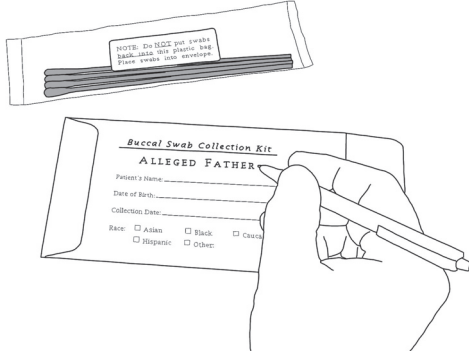

أخرج ظرفاً واحداً من مسحات الخد من مجموعة جمع العينات. تأكد من استخدام ظرف "الأب المزعوم" للأب الذي خضع للاختبار، و ظرف "الطفل" للطفل الذي خضع للاختبار. إذا لزم الأمر خضع ملصقاً مناسباً "على ظرف" الطرف الإضافي الذي خضع للاختبار

أكمل المعلومات المطلوبة على ظرف المسحة. تأكد من تقديم معلومات عن العرق، نهضروية جراء الحسابات الإحصائية


الخطوة 2: جمع المسحات

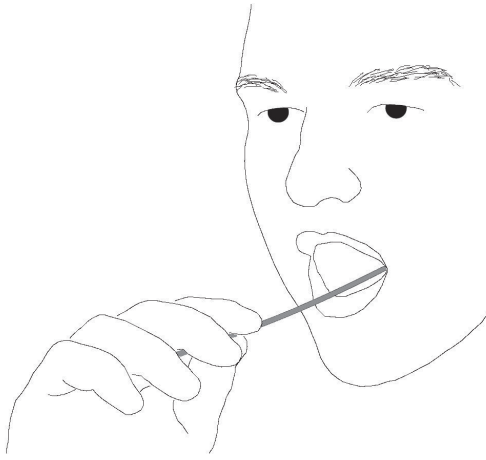

قم بفتح الغلاف البلاستيكي من الطرف المقابل لطرف القطن. أخرج مسحة واحدة من العبوة مع الحرص على عدم لمس الطرف القطني

افتح الفم جيداً. أدخل المسحة إلى الفم وافركها بقوة ذهاباً وإياباً ومن الأعلى إلى الأسفل على الجزء الداخلي من الخد. من المهم جمع كمية كافية من خلايا الخد على كامل المسحة، لذا تأكد من تدوير المسحة أثناء الفك. قد يتطلب عدم كفاية العينة إعادة جمعها، مما قد يؤدي إلى تأخير نتائج الاختبار

الخطوة 3: وضع المسحة المستخدمة في الظرف

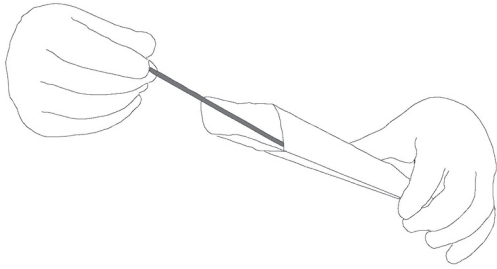

أخرج المسحة من الفم وضعها مباشرة في الظرف الورقي المخصص والمُعنون باسم ذلك الشخص

تنبيه: ** تقم بإعادة وضع المسحات في الغلاف البلاستيكي **

كرر عملية جمع العينات باستخدام المسحات المتبقية. استخدم 2 مسحتين على الخد الأيمن و 2 مسحتين على الخد الأيسر لكل شخص خاضع للفحص. بعد استخدام جميع 4 المسحات، تخلّص من الغلاف البلاستيكي وأغلق الظرف الورقي المُعنون باسم ذلك الشخص بإحكام

الخطوة 4: كرر الخطوات 1 إلى 3 لكل شخص خاضع للفحص

كرر عملية جمع العينات بالكامل لكل شخص خاضع لفحص. تذكر وضع العلامة الصحيحة على كل عينة واستخدام جميع 4 المسحات المخصصة لكل فرد

الخطوة 5: تعبئة العينات في الظرف المخصص

بعد جمع العينات من جميع الأشخاص الخاضعين لفحص، يرجى إكمال نموذج معلومات العميل. ضع الظرف الورقي لكل مسحة والنموذج المكتمل داخل الظرف البريدي المقدم. أغلق الظرف بإحكام وأرسل الطرد إلى المختبر